

機械器具 (18) 血圧検査又は脈波検査用器具
管理医療機器 自動電子血圧計 (JMDN コード: 16173000)

テルモ電子血圧計 W5200

【禁忌・禁止】

<適用対象(患者)>

- (1) 乳幼児及び小児または意思表示のできない人には使用しないこと。[ケガや事故をおこすおそれがある。]

<併用医療機器> 「相互作用の項参照」


- (1) MRI 検査を行う際は本品を検査室に持ち込まないこと。[MR 装置への吸着や、熱傷等のおそれがある。]
(2) 高圧酸素患者治療装置に本品を持ち込まないこと。[誤作動や破損、爆発のおそれがある。]

<使用方法>

- (1) 測定結果の自己判断や自己判断による治療はしない。[必ず医師の指導、指示に従うこと。]
(2) 傷など未治癒の腕に腕帯を巻かないこと。[症状を悪化させるおそれがある。]
(3) 点滴静脈注射や輸血を行っている腕に腕帯を巻かないこと。[ケガや事故をおこすおそれがある。]
(4) 可燃性ガス及び支燃性ガスの近くでは使用しないこと。[発火・引火のおそれがある。]
(5) 耐用期間を超えて使用しないこと。[正しく測定できないおそれがある。]
(6) 腕帯を含む付属品は指定されたものを使う。[指定外のものをを用いると、誤差の原因になる。]
(7) 不特定多数の人が対象となる医療機関や公共の場所では使用しないこと。[事故やトラブルの原因になる。]

【形状・構造及び原理等】

<構造図>

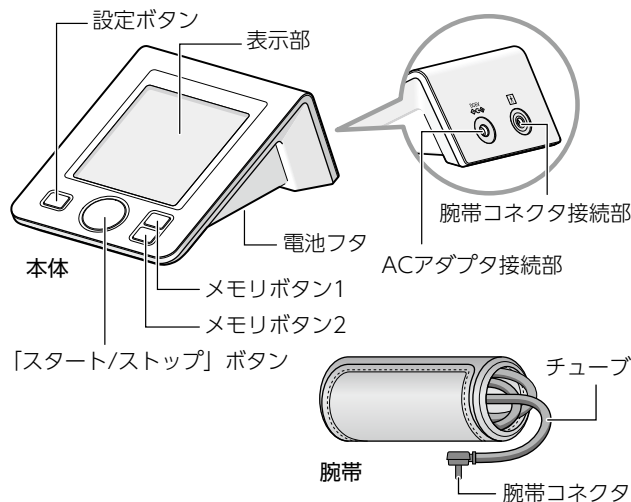

<装着部組成>

ナイロン

** <標準付属品>

| | |
|-----------------------------------|----|
| 取扱説明書／品質保証書 | 1部 |
| 単3形アルカリ乾電池 | 4本 |
| 専用 AC アダプタ | 1個 |
| 型式 UM305-0605 (Code No. XX-ES354) | |
| 収納袋 | 1枚 |

* <製品仕様>

| | |
|--|--|
| 本体寸法 | 約縦 174.0 × 横 114.0 × 高さ 70.4mm |
| 本体質量 | 約 315g (乾電池を除く) |
| 圧力表示範囲 | 3 - 300mmHg (腕帯圧力) |
| 血圧測定範囲 | 50 - 250mmHg (最高血圧) 40 - 180mmHg (最低血圧) |
| 脈拍測定範囲 | 30 - 199 拍/分 |
| 最大圧力 | 300mmHg |
| 環境条件による圧力表示誤差 | 150mmHg を超えない場合は ± 3mmHg 以下、 150mmHg を超える場合は測定値の 2% 以下 |
| 臨床性能試験による血圧測定誤差 | 聴診に対する 平均誤差 ± 5mmHg 以内 標準偏差 8mmHg 以内 |
| 脈拍測定精度 | ± 5% 以内 |
| 停止操作 | スイッチを切った後 30 秒以内に 15mmHg まで減圧 |
| 血圧測定の再現性 | 血圧判定の再現性は 3.0mmHg (0.4kPa) 以下 |
| 使用環境 | 温度: 10 - 40℃、 相対湿度: 15 - 85% RH (結露なきこと) |
| 測定可能上腕周囲 | 約 17 - 36cm |
| 電撃保護 | 内部電源機器/クラス II 機器 BF 形装着部 |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 4 本または専用 AC アダプタ |
| 電氣的定格 | 単3形アルカリ乾電池 4 本使用時 DC6V/4W 専用 AC アダプタ使用時 アダプタ定格: AC100-240V 50/60Hz 0.16-0.12A 本体定格: DC6V 0.5A |
| 水又は粒子物質の有害な侵入に対する保護 | IP20 |
| 空気・可燃性麻醉ガス、又は酸素又は亜酸化窒素・可燃性麻醉ガス中での使用の安全の程度による分類 | 空気・可燃性麻醉ガス、又は酸素又は亜酸化窒素・可燃性麻醉ガス中での使用に適しない機器 |
| 作動(運転)モードによる分類 | 連続作動(運転) 機器 |

本製品は EMD 規格 IEC60601-1-2:2014 に適合している。

<作動原理>

動脈を腕帯で圧迫すると、心拍に合わせて脈動が起こり、腕帯内の圧力が脈動と同調する。この脈動は腕帯の圧迫状況に応じ変化する。オシロメトリック式の血圧計は、腕帯の圧力を徐々に変化させた時に見られる脈動の大きさの変化をもとに最高血圧及び最低血圧を決定する。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用目的又は効果】

健康管理のために収縮期血圧及び拡張期血圧を非観血的に測定すること。

【使用方法等】

<操作方法>

1. 腕帯（圧迫帯）の腕帯コネクタを本体の腕帯コネクタ接続部に差し込む。
2. 腕帯を上腕に装着する。
3. [スタート/ストップ] ボタンを押して測定を開始する。
腕帯の加圧、測定、腕帯圧力の排気が自動で行われ、測定が完了すると、測定結果が表示部に表示される。
4. [スタート/ストップ] ボタンを押して時計表示に戻す。
ボタンを押さなくても約2分で自動的に時計表示に戻る。
測定結果がメモリに保存される。

<安全装置>

装置の異常発生時や測定を中断する場合は、[スタート/ストップ] ボタンを押す（腕帯から空気が急速に抜け、測定が中止される）。

【使用上の注意】

<使用注意（次の患者には慎重に適用すること）>

- * (1) 次の状態や症状または過去に処置を受けたことのある方は医師に相談のうえ使用すること。[正しく測定できないおそれがある。]
- ・妊娠中毒症を含む妊婦
 - ・糖尿病
 - ・肝臓病
 - ・動脈硬化
 - ・高血圧症
 - ・不整脈
 - ・乳腺切除した方
 - ・血管内挿管
 - ・血管内治療
 - ・動静脈（A-V）シャント
 - ・リンパ節の除去

<重要な基本的注意>

- (1) 異常加圧が発生した場合は、[スタート/ストップ] ボタンを押して測定を中止すること。
 - (2) 血圧は以下の要因で変動するので注意すること。
 - ・時刻や季節
 - ・高血圧治療などの薬剤
 - ・飲食（アルコールを含む）
 - ・喫煙
 - ・身体活動
 - ・精神的緊張
 - ・入浴
 - ・尿意
 - ・会話
 - ・その他の環境（病院での受診中など）
 - ・測定姿勢（心臓に対する腕帯の高さを含む）
 - (3) 本機器を水や消毒液等に浸さないこと。
 - (4) 腕帯の締め付けにより、一過性の内出血が発生し赤みが残る可能性がある。痛みを感じた場合には[スタート/ストップ] ボタンを押して測定を中止すること。
 - (5) 救急搬送中の患者の血圧測定に使用しないこと。
 - (6) 必要以上の頻度で測定を行わないこと。
- ** (7) 使用中は腕帯コネクタの抜けに注意すること。

<相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）>

【併用禁忌（併用しないこと）】

| 医療機器の名称等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|-------------------|--|---|
| MRI装置（磁気共鳴画像診断装置） | 検査室に本機器を持ち込まないこと。 MRI検査を行うときは、本機器を患者から取り外すこと。 | 誘導起電力により局所的な発熱で火傷のおそれがある。 また、磁気により本機器が吸着されるおそれがある。 |
| 高血圧患者治療装置 | 装置内に持ち込まないこと。 | 誤動作や破損及び経時的な劣化をきたすおそれがある。 また、爆発の誘因となるおそれがある。 |

【併用注意（併用に注意すること）】

| 医療機器の名称等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|---|-----------|-----------------------------------|
| 電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器（ペースメーカー、植込み型除細動器など） | 併用に注意する。 | 誤動作のおそれがある。 |
| 腕帯を巻いた側の腕や手に装着した医療機器 | 併用に注意する。 | 腕帯の加圧により医療機器の機能に一時的な影響を及ぼすおそれがある。 |
| 電気手術器（電気メス） | 併用に注意する。 | 電気メスの高周波エネルギーにより本機器が誤動作する可能性がある。 |
| 装着形の医用電子機器（心電計など） | 併用に注意する。 | 誤動作のおそれがある。 |
| 電磁波を発生する機器（電子レンジ/電磁調理器など）や電波を発生する機器（携帯電話/PHSなど） | 併用に注意する。 | 誤動作や故障の原因になる。 |

<不具合・有害事象>

【不具合】

動作不良、故障、破損、誤計測

【有害事象】

痛み、アレルギー反応、血行障害

<妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用>

- (1) 妊婦、産婦が使用する場合は、医師に相談のうえ使用すること。
- (2) 乳幼児及び小児または意思表示のできない人には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- (1) 次回の使用に支障のないよう清潔に保ち湿気の少ないところに保管すること。
保管環境 温度：-20 - 60℃、
相対湿度：10 - 95% RH（結露なきこと）
- (2) 長期間使用しないときには、電池を取り外すこと。[電池の液もれが起り、製品を傷める原因になる。]

** <耐用期間>

5年あるいは30,000回(消耗品を除く)[自己認証(自社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用後は汚れなどがいないか確認すること。
- (2) 血圧計本体の表面の汚れは、ぬるま湯や石けん水を含ませた布でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭きする。
- (3) 腕帯の汚れは中性洗剤を使い、表面をやさしくたたいて落とす。
- (4) チューブに水が入らないように注意し、しっかり乾かすこと。
- (5) 洗濯機を使用したりこすったりしないこと。
- (6) ベンジン、シンナー、ガソリン、アルコールなどの溶剤は使用しないこと。[製品を傷める原因になる。]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：日本精密測器株式会社
電話番号：0279-20-2311
販売業者：テルモ株式会社

